

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

Syis Dermo Lift&Peel hudskrubberapparat



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2025



Skanna
för olika
språk



! KONTRAINDIKATIONER FÖR INGREPPET:

- graviditet
- skador, hudavskrapningar
- svamp-, bakterie- och viruslesioner
- sjukdomar i nervsystemet
- psykiska sjukdomar
- epilepsi
- cancer (under och efter behandling)
- infektioner
- del av huden under vilken det finns metall (t.ex. metallimplantat i ett ben efter att det har brutits), plast, silikon (t.ex. silikonimplantat i bröst)
- delar av huden där medicinska och elektroniska instrument som hörapparater, pacemakers, konstgjorda hjärtan etc. är placerade.
- barn under 12 års ålder
- huddelar med metallelement i kroppen (t.ex. piercing i buken)
- högt blodtryck
- diabetes
- hjärtsjukdomar

Den fullständiga behandlingen omfattar hudrengöring med hjälp av kavitationspeeling och injektion av aktiva substanser i ampuller med hjälp av sonofores. **Före behandlingen desinficerar vi metalleden av spateln (vi sprutar inte spateln direkt med vätskan). med vätska).**

Tekniska data:

- Kavitation peeling 25kHz
- Ultraljud 2MHz
- Spänning 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laddare:
AC-ingång 100-240 V, 50/60 Hz DC-
utgång 5,5 V, 500 mA
- Batteri DC 3,7 V 850 mA
- Maximal effekt 1,5 W $\pm 10\%$.

Utförande av behandlingar:

Före behandling, utför peeling, toning och sminkborttagning

PEELING MED KAVITATION

- Fukta huden med SYIS tonic eller micellär vätska. Under kavitationspeelingen måste huden fuktas, tack vare vilket fenomenet kavitation uppstår. Det är viktigt att upprepa proceduren regelbundet så att det inte uppstår någon brännande effekt. Detta skapar mikroskopiska gasbubblor och en serie kemiska processer som resulterar i nedbrytning av döda celler i stratum corneum.
- Använd START/STOP-knappen för att starta apparaten,
- Använd MODE-knappen för att ställa in en låg frekvens för ytlig rengöring eller en hög frekvens för djuprengöring (se fig. 1).
- Metalleden av spateln måste styras i en vinkel på 45 grader från hudytan (se fig. 2). För spateln från mitten av ansiktet och utåt (se fig. 3) utan att stanna. Behandlingstiden är ca 10 minuter.

SONOFORES

- Innan du påbörjar sonoforesbehandlingen ska du applicera SYIS ultraljudsgel blandad med den valda SYIS-ampullen i ansiktet.
- Tryck på START/STOP-knappen för att starta apparaten
- Tryck på MODE-knappen för att ställa in frekvensen på låg - ytlig injektion eller hög - djup injektion (se fig. 1)
- Vänd på spateln och för den släta metallspetsen över huden i vinkel 45 grader från hudytan (se fig. 4). För spateln långsamt från mitten av ansiktet och utåt (se fig. 3), utan att stanna. Se till att huden är täckt av gel vid injektionsstället. Behandlingstiden är ca 10 minuter.



WTŁACZANIE / SONOFOREZA	
L	(L) NISKA CZĘSTOTLIWOŚĆ
H	(H) WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ
PEELING KAWITACYJNY / SKIN SCRUBBER	
L	(L) NISKA CZĘSTOTLIWOŚĆ
H	(H) WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ

Rys.1 Sposób wyświetlania się diod w poszczególnych trybach pracy




OCZYSZCZANIE

Rys. 2 Sposób w jaki należy trzymać szpatułę podczas zabiegu oczyszczania - kąt 45°



Rys. 3 Kierunki poruszania szpatułką podczas zabiegu oczyszczania i sonoforezy.

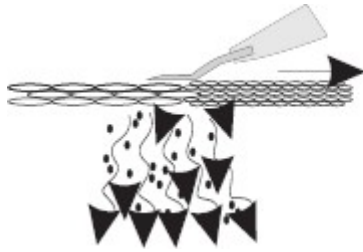

WTŁACZANIE

Rys. 4 Sposób wykonywania zabiegu sonoforezy

KOMPLETTERANDE VÅRD

- Efter behandlingen, för att lindra rodnaden, applicera den utvalda SYIS algae mask. Masken ger huden extra näring och gör den ljusare och mer enhetlig i färgen.
- Efter att masken avlägsnats applicerar du en SYIS-kräm som är anpassad till huden.

Var uppmärksam!

- Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer måste utföras av en servicetekniker på ACTIVESHOP.
- Installera eller använd inte enheten i närheten av våtutrymmen eller med våta händer, se till att inga vätskor tränger in i enheten.
- Dra ut stickkontakten och kontakta ACTIVESHOPs serviceavdelning i följande fall
 - vätska har trängt in i apparaten
 - apparaten avger en konstig lukt, rök eller gör konstiga ljud,
 - strömkabeln är skadad,
 - apparaten har välts omkull eller dess hölje är skadat.
- Lägg inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten där nätsladden kan skadas.
- För inte in något i enhetens öppning. Om ett främmande föremål faller in i hålet ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta din distributör eller tillverkaren.
- Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Om den tappas, kan enheten skadas.
- För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas att att hålla ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen mellan påslagning och avstängning, och vice versa).
- Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska eller till och med brinner upp.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor tränger in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) enheten har välts eller dess hölje har skadats.

5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du slutar arbeta med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du faror.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



BORTSKAFFANDE AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste begagnad elektrisk utrustning samlas in

separat och sedan lämnas till samlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara, så de bör lämnas in för återvinning på lämpliga samlingsplatser och kan också lämnas till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C i sin originalförpackning. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.