

ACTIVESHOP[®]

Användningsinstruktion

Kosmetisk stol Azzurro Lux 3m



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025



Skanna
för olika
språk



Varning!

1. Fotstödet är inte avsett att bära hela vikten av en vuxen person.
2. Det är förbjudet att sitta direkt på armstödet och fotstödet.
3. Lyft inte tyngre än vad stolen tål.
4. Av säkerhetsskäl ska du alltid ansluta strömsladden till ett jordat uttag.
5. Fäst inte strömsladden i apparaten. Om du lyfter eller drar i strömsladden kan den gå sönder. Se till att strömsladden lätt kan dras ut i en nödsituation.
6. Innan du flyttar den elektriska kosmetiska stolen ska du dra ut strömsladden så att den inte fastnar mellan stolens delar.
7. Om strömsladden är skadad, koppla omedelbart bort sladden, använd inte stolen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast den ursprungliga strömsladden.
8. Låt inte någon som inte utför behandlingen styra fjärrkontrollen.
9. Placera inga föremål under stolen.
10. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt stolen så att den kan fällas ihop och fällas ut utan problem.
11. Se till att det inte finns några vassa eller skadliga föremål runt stolen som kan skada enheten.
12. Modifiera inte enheten på egen hand. Om stolen inte fungerar som den ska, sluta använda den och kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
13. Lägg inte tunga föremål på stolen och hoppa inte på den.

Montering

1. Sätt in nackstödet i hålet på ovansidan av ryggstödet (fig. 1).
2. Ställ in och koppla ihop vänster och höger armstöd med bulten i stolen och vrid sedan 90° moturs (fig. 2).


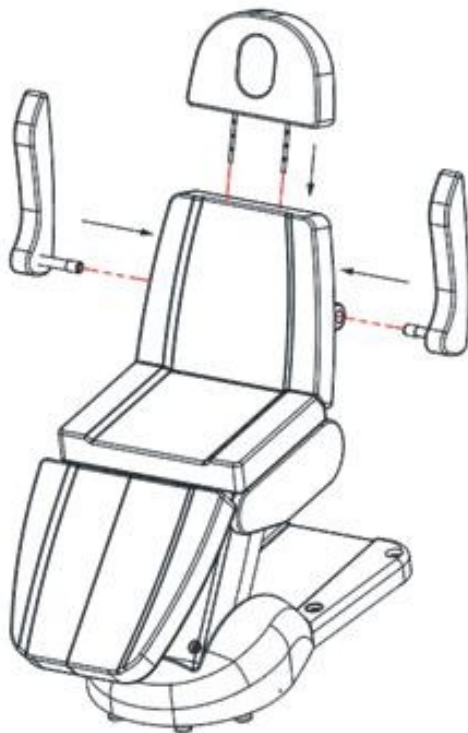


Fig. 1



Fig. 2


Fjärrkontroll

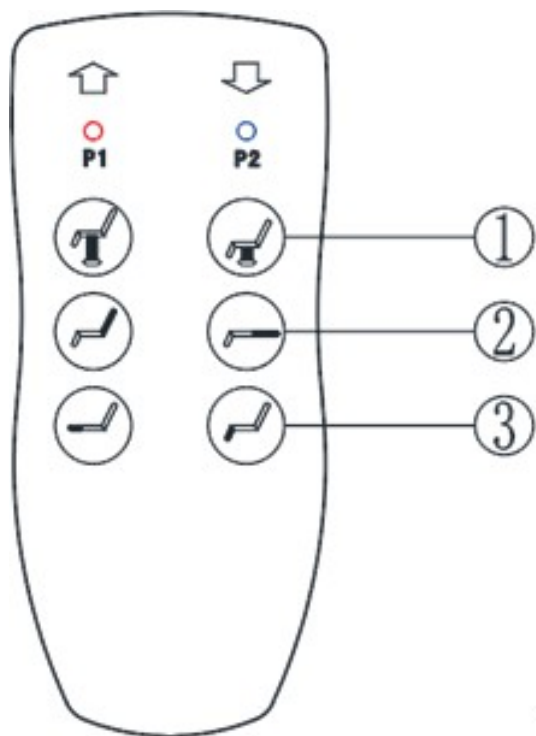


1. Tryck på knappen  för att höja stolen.
1. Tryck på knappen  för att sänka stolen.
2. Tryck på knappen  för att öka ryggstödet lutningsvinkel.
2. Tryck på knappen  för att minska ryggstödet lutningsvinkel.
3. Tryck på knappen  för att öka fotstödet lutningsvinkel.
3. Tryck på knappen  för att minska fotstödet lutningsvinkel.

Ytterligare funktioner

- Dra handtaget bakåt och håll det intryckt för att justera fotstödet lutningsvinkel.

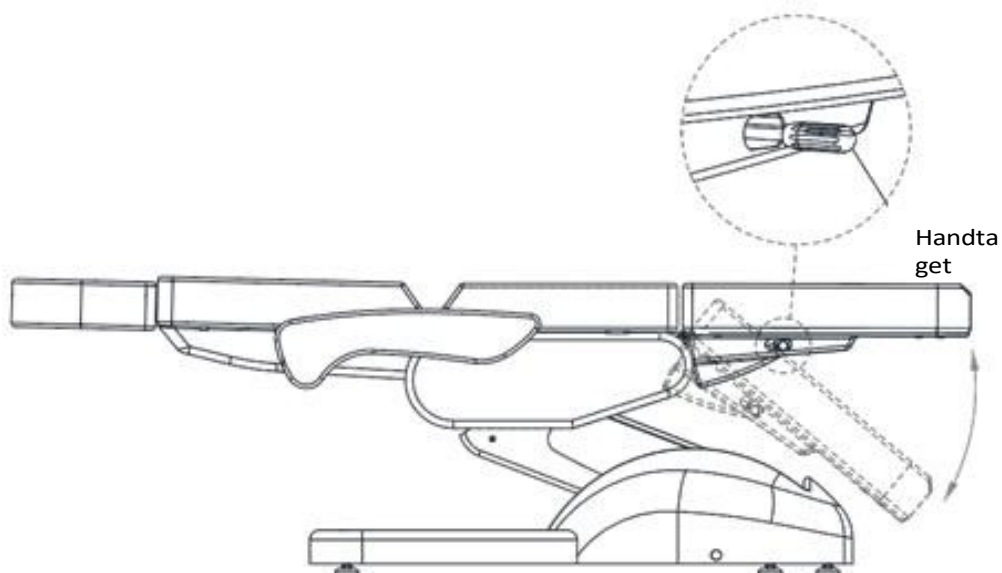

- Huvudstödetets höjd kan justeras genom att dra upp det eller trycka ner det.

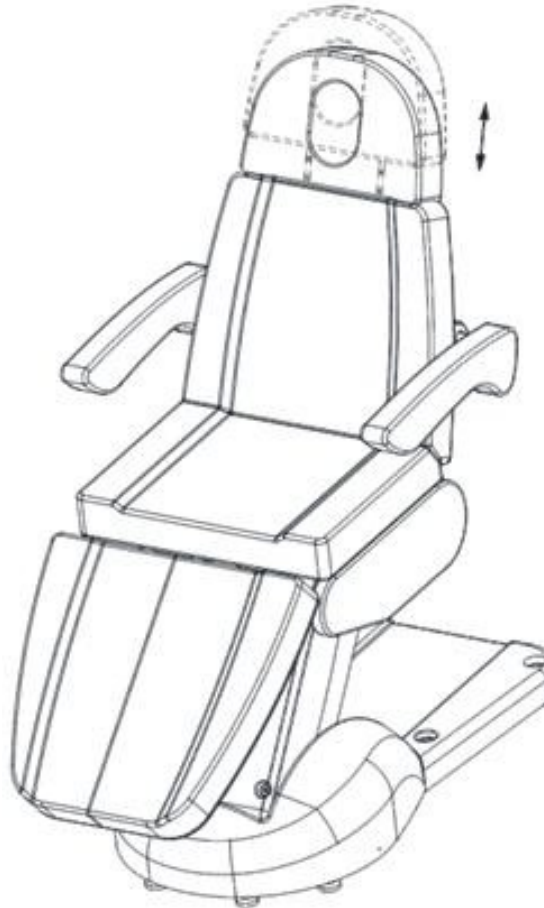

Underhåll:

Rengöring och desinfektion av enheten:

- Koppla bort enheten från strömförsörjningen innan du börjar rengöra den.
- För att hålla stolens yta i gott skick bör den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användning. Det rekommenderas att utföra en noggrann desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

- För att rengöra metall- och plastytor samt reglage, torka av dem med en fuktig med en trasa. För att rengöra svåråtkomliga ställen eller hörn är en liten borste lämplig. Använd inte för mycket rengöringsmedel. Desinficera sedan apparaten med lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

- Det bästa är att rengöra med en mild rengöringslösning. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Lackerade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattendysor (dusch, högtrycksspolare) för rengöring.
- Rengör inte vid hög temperatur och hög luftfuktighet, utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskespill.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Sätets yta

- Torka av stolens yta jämnt med ett speciellt rengöringsmedel för läder och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Innan du underhåller enheten måste du koppla bort den från strömförsörjningen.

- Reparationer ska utföras av erfaren personal som är auktoriserad av tillverkaren.
- Reparationer utförda av icke auktoriserad personal kan orsaka personsador eller skador på enheten, för vilka tillverkaren inte ansvarar.
- Använd endast originalreservdelar som godkänts av tillverkaren.
- Använd inte den elektriska kosmetiska stolen eller tillbehören om de inte fungerar korrekt.
- Allt underhåll och alla reparationer måste dokumenteras.

Varning!

- Om du upptäcker några fel, sluta använda utrustningen och kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Endast erfaren eller auktoriserad personal får öppna eller byta ut ställdonet / styrenheten.
- Om någon del av enheten är skadad, koppla bort strömkabeln och sluta använda den. Meddela sedan serviceavdelningen.

Felsökning:

Problem	Diagnos	Lösning
Knapparna reagerar inte	- Kontrollera att strömkontakten är ansluten - Kontrollera att alla anslutningskontakter till transformatorn är korrekt anslutna	- Koppla ur nätkontakten och koppla in den igen - Koppla bort alla anslutningskontakter och anslut dem igen
Det uppstår ljud och vibrationer när stolen lyfts	- Lossa skruvar	- Dra åt skruvarna
Kontrolllampan lyser inte	- Kabeln till fjärrkontrollen är inte ordentligt ansluten eller fjärrkontrollen är trasig	- Anslut kabeln igen. Om den fortfarande inte fungerar, byt ut fjärrkontrollen

Tekniska data:

Mått: 2000 x 810 x 610–910 mm

Maximal belastning: 140 kg

Nettovikt: 76 kg

Justerbart höjdintervall: 610–910 mm

Ingångsspänning: AC 100–130 V / 220–240 V, 50/60 Hz

Utgångsspänning: DC 24 V

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Enheten får endast användas av kvalificerad skönhetspersonal för att undvika oönskade effekter under behandlingen.

2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer måste utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, våta platser eller med våta händer – så att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur uttaget och kontakta en auktoriserad serviceverkstad som tillhandahålls av företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk i följande fall: a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller ger ifrån sig konstiga ljud, c) strömkabeln har skadats, d) enheten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Lägg inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur uttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Stoppa inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål fastnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en ostadig vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enheten en fastställd livslängd rekommenderas att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avslagning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

OBS!

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika fara.
2. Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med användningen.
3. Enheten är inte avsedd för lek av barn. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om användningen av enheten befinner sig i dess närhet.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



AVFALLSHANTERING

Använda elektriska apparater, instrument och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet. Följ bestämmelserna för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall av elektriska och elektroniska utrustningar. Använda elektriska utrustningar ska samlas in separat och sedan överlämnas till samlingsställen för använd elektronisk och elektrisk utrustning.

När produkterna har tjänat ut sin livslängd, liksom gamla apparater, innehåller de värdefulla återvinningsbara komponenter och bör därför lämnas in för återvinning. De ska därför lämnas in till lämpliga samlingsställen, men kan också lämnas in till företaget ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i temperaturer mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C och endast i originalförpackningen. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.

