

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Fräsmaskin VIVA 602 S



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024



Tekniska data

Nominell spänning	12 V 2 A
Utgångsspänning	12 V 2 A
Effekt	36 W
Varvtal	45 000 varv/min

Mått




Obs

1. Rengör enheten regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av dessa kan leda till att enheten inte fungerar korrekt eller till och med skadas.
2. Det är inte tillåtet att linda strömsladden runt enheten, eftersom detta kan orsaka fel på sladden.
3. Se alltid till att enheten ansluts till en strömkälla med rätt märkspänning. Se till att kontakten är ordentligt ansluten till uttaget. Underlåtenhet att göra detta kan leda till brand, elstötar eller brännskador.
4. Kabeln får inte modifieras, sträckas, böjas för mycket eller vridas.
5. Lägg inte något tungt på sladden.
6. Förhindra att damm eller andra skadliga partiklar tränger in i kontakten, basen eller huvudet genom att använda dammsugare.
7. Slå inte på eller kasta enheten. Om enheten skadas till följd av ett slag eller fall får den inte användas vidare.
8. Försök inte demontera eller reparera utrustningen. Kontakta den återförsäljare där utrustningen köptes eller en auktoriserad serviceverkstad för reparation.

Enhetens konstruktion

Ikon för rotationsriktning Ikon för batteri

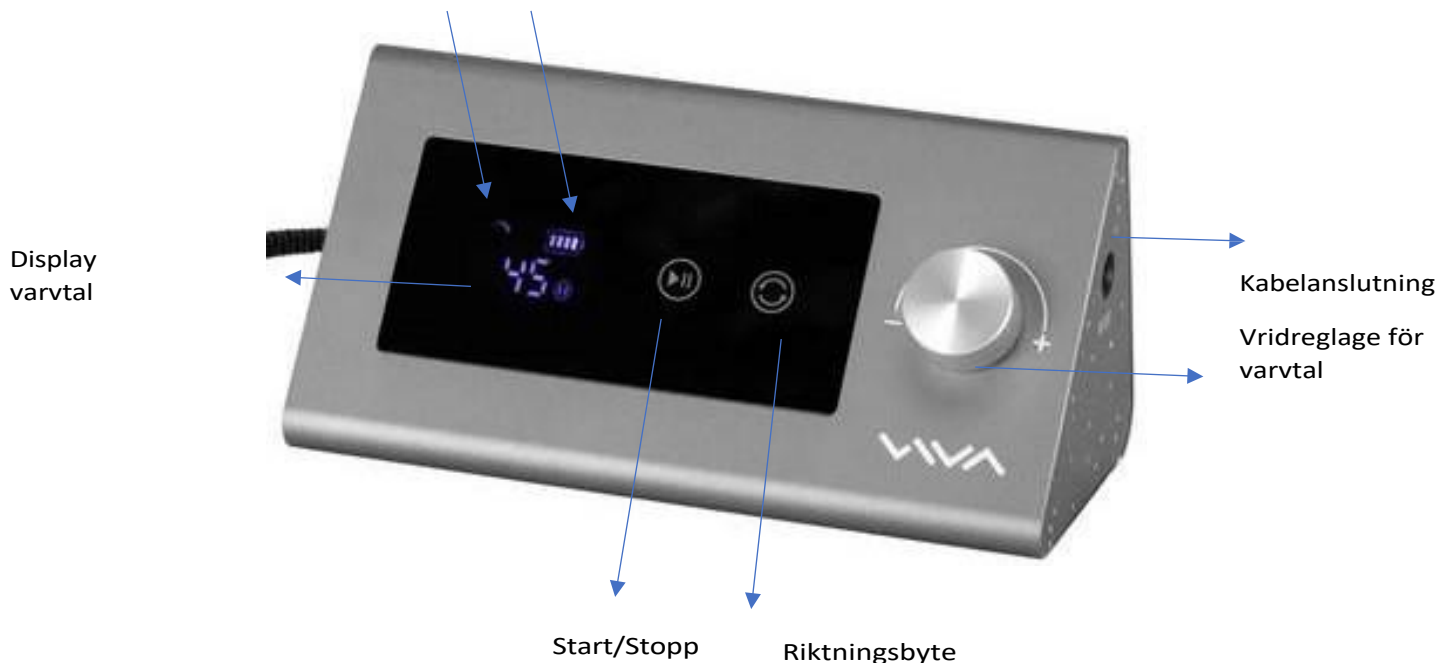

Bruksanvisning:

1. Se till att fräsen är korrekt placerad och låst. Huvudet har ett twist-lock-system som gör det enkelt att sätta i och ta ut fräsen.
2. Anslut enheten till elnätet och starta den med Start/Stop-knappen.
3. Justera varvtalet (RPM) med hjälp av vridknappen genom att vrida den åt vänster eller höger.
4. Du kan välja rotationsriktning genom att trycka på knappen .
5. När behandlingen är klar, sänk varvtalet till minimum, stäng av enheten och koppla bort den från elnätet.

Byte av fräs

1. För att byta fräs vrider du Twist Lock-vredet åt vänster, mot symbolen med det öppna hänglåset.
2. Nu kan du ta ut fräsen ur spindeln och byta ut den mot en ny.
3. När fräsen är på plats i spindeln vrider du Twist Lock-vredet åt höger, mot symbolen med det stängda hänglåset, tills du hör ett karakteristiskt klick.
4. Den önskade hastigheten för fräsen beror på typen och materialet som fräsen är tillverkad av. I detta avseende bör du ta del av informationen från tillverkaren.

Observera

Felet Er1 kan visas på skärmen om fräsen inte är korrekt isatt eller inte är låst.

SÄKERHETSÅTGÄRDER


1. Enheten är en professionell utrustning avsedd för användning i skönhetssalonger. Endast kvalificerad personal får använda enheten för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. Allt underhålls- och reparationsarbete måste utföras av personal från en auktoriserad serviceverkstad (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, fuktiga platser eller med våta händer – så att inga vätskor tränger in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade servicen som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - A) Vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden är skadad, d) enheten har välts eller höljet har skadats.
5. Lägg inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömsladden ur vägguttaget varje gång du är klar med enheten
7. Stick inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål hamnar i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Enheten får inte placeras på en ostabil vagn, hylla eller ett fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enstaka livslängd rekommenderas att vänta en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för att enheten inte fungerar korrekt, skadas eller till och med brinner upp.

OBSERVERA:

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika risker.
2. Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år gamla samt av personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller personer utan erfarenhet eller kunskap om apparaten, förutsatt att de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med användningen.
3. Enheten är inte avsedd att användas som leksak av barn. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur enheten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, varför den ska användas och förvaras utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERING

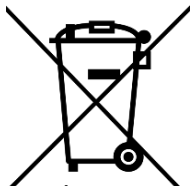

Uttjänta elektriska apparater, tillbehör och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfall. Följ reglerna för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om uttjänta elektriska apparater, uttjänta elektriska apparater ska samlas in separat och därefter lämnas till samlingsställen för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning.

När produkten har tjänat ut sin livslängd, liksom gamla apparater som innehåller fullvärdiga återvinningsbara komponenter, bör de lämnas in för återvinning. De bör därför lämnas till lämpliga samlingsställen, men kan även lämnas till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras vid en temperatur mellan (–) 20 °C och (+) 50 °C, uteslutande i originalförpackningen. Enheten ska förvaras på en väl ventilerad plats med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.